

EDGE SURGICAL SOLUTIONS develops and manufactures cabinets and furniture for: Ambulatory Surgery Center, Sterilisation Room, Outpatient Room and Front Office. The EDGE SURGICAL SOLUTIONS Furniture Project is paramount thanks to its innovative constructive and installation solutions that allow for an easier operating activity in the room, speed up the picking of needed instruments and material, guarantee the use of single modules as workstations during the procedures reducing obstacles and inefficiencies while allowing for a faster and easier disinfection of the operating area at the end of the activity when all modules can be stored back in the Corian® Garage. It's a space saving, clean and elegant setup that can be adapted to any room size.

Le site de production de EDGE SURGICAL SOLUTIONS développe et fabrique une gamme de mobilier sur-mesure pour: Ambulatoire de Chirurgie, Salle de stérilisation, Ambulatoire de Visite et Front Office. Le Projet Mobilier de EDGE SURGICAL SOLUTIONS se caractérise par une solution innovante de conception et d'installation à l'intérieur du Cabinet Médical, qui facilite l'ensemble des activités, comme les opérations de picking, permettant d'utiliser chaque modules comme desserte à outils en proximité de la zone d'activité et réduisant l'encombrement lors des interventions, tout en garantissant une désinfection parfaite et rapide. Une fois la journée de travail terminée, les meubles peuvent être facilement stockés à l'intérieur du garage réalisé entièrement en Corian®, facilitant les opérations de désinfection de la pièce, car l'encombrement étant réduit au minimum.

EDGE SURGICAL SOLUTIONS Progetta e Realizza nei suoi Stabilimenti Arredi su Misura per: Ambulatorio Chirurgico, Sala di Sterilizzazione, Ambulatorio Visita e Front Office. Il Progetto Arredi di EDGE SURGICAL SOLUTIONS è caratterizzato da un'innovativa soluzione costruttiva e di installazione che agevola l'attività dell'operatore in sala, facilita le operazioni di picking, permette di utilizzare i moduli come servomobili vicini alla zona operativa riducendo gli ingombri e le inefficienze durante gli interventi e garantisce una perfetta e veloce disinfezione e alla fine della giornata di lavoro possono essere facilmente riposti all'interno del garage interamente realizzato in Corian® agevolando le operazioni di disinfezione della sala riducendo al minimo gli ingombri.



EDGE SURGICAL SOLUTIONS cabinets are entirely built in metal sheet, riveted and painted with epoxy powder, the drawers modules are independent and mobile thanks to the 4 medical grade castors with 2 front brakes and no-mark rubber; the drawers are finished with metal front panels, different dimensions and colours at choice, push-pull opening/closing system and handles/free for a better and easier disinfection. The Sink is built in the Corian® working top and it guarantees perfect disinfection. State of the art design, elegant and high quality material, perfect ergonomics and absolute infection control define this EDGE SURGICAL SOLUTIONS unique project as a benchmark in Medical Furniture.

Les meubles EDGE SURGICAL SOLUTIONS sont entièrement fabriqués en acier riveté et peints à poudres époxy. Les éléments à tiroirs sont tous indépendants et mobiles, grâce à 4 roues anti-marques de qualité médicale équipées de deux freins à l'avant, d'une série de tiroirs de différentes tailles au choix et avec un système d'ouverture/fermeture Push-Pull. Les façades sont en acier peintes en différentes couleurs et sans poignées afin de garantir une parfaite désinfection. L'évier en Corian® s'intègre parfaitement au plan de travail, également réalisé en Corian®.

Un design de pointe, des matériaux élégants et de haute qualité, une ergonomie parfaite et une parfaite désinfection rendent le Projet Mobilier de EDGE SURGICAL SOLUTIONS une référence absolue en matière de mobilier médical.

Gli arredi EDGE SURGICAL SOLUTIONS sono interamente costruiti in lamiera di acciaio rivettata e verniciata con polveri epossidiche, i moduli cassetteria sono tutti indipendenti e mobili grazie alle 4 ruote medical-grade e anti-mark, dotate di due freni anteriori, cassetti di varie dimensioni a scelta e con sistema push-pull, pannelli frontali in lamiera di acciaio verniciati in diversi colori e senza maniglia per una più facile disinfezione, il lavello in Corian® è perfettamente integrato nel piano lavoro anch'esso interamente realizzato in Corian®. Una soluzione elegante, funzionale ed ergonomica unica sul mercato.





Garage Structure in steel and completely covered in Corian® to house the mobile modules. Splash-proof Corian® worktop guarantees easy cleaning and disinfection and long durability.

Structure du garage en Corian® (avec structure en acier) pour loger les meubles. Plan de travail en Corian® anti-éclaboussures garantit un nettoyage et une désinfection faciles et une longue durabilité.

Struttura a garage in Corian® (con rinforzo in acciaio) per ospitare i servomobili. Piano in Corian® con anti-splash, garantisce una facile pulizia e disinfezione e una grande durata nel tempo.



Drawers with push-pull system with stabilizer bar. Internal abs instruments trays for perfect disinfection and perfect storage.

Tiroirs avec système push pull avec barre stabilisatrice. Bac en plastique interne pour un nettoyage facile et une bonne organisation du rangement.

Cassetti con sistema di guide push pull con barra stabilizzatrice. Interni cassetto in plastica per una facile pulizia e una buona organizzazione del contenuto.



Mobile Cabinet Modules, 4 medical-grade, non-marking wheels equipped with two front brakes for easy maneuverability.

Meubles sur roues. 4 roues de qualité médicale et anti-marques équipées de deux freins à l'avant, pour une maniabilité aisée.

Servomobile su ruote. 4 ruote medical-grade e anti-mark, dotate di due freni anteriori, per una facile manovrabilità.



Corian® Worktop for an easier maneuverability of the mobile modules.

Plan de travail en Corian® avec poignée intégrée pour déplacer le meuble en toute simplicité.

Piano in Corian® con maniglia integrata per movimentare il servomobile con facilità.



Sink integrated on the Corian® worktop, available in both stainless steel and Corian® in different sizes and models.

Évier intégrables au plan en Corian®, disponibles aussi bien en acier inoxydable qu'en Corian® dans différentes tailles et modèles.

Lavabi integrabili nel piano in Corian®, disponibili sia in acciaio inox che in Corian® in diverse misure e modelli.



Hanging cabinets with drawers and flaps in different sizes and wall furniture with custom-made shelves.

Casiers suspendus avec tiroirs avec chevalet de différentes tailles et meubles hauts avec étagères sur mesure.

Pensili con cassetti a ribalta di varie dimensioni e pensili con ripiani realizzati su misura.



Possibility to integrate an archive and reporting desk with Methacrylate divider from operating area.

Possibilité d'intégrer un plan d'archive et reporting. Possibilité d'équiper avec séparateurs et paravent.

Possibilità di integrare un piano per la refertazione, dotato di separè dalla parte operativa.




Possibility of integrating a stainless steel insert on the Corian® worktop to place the hot trays taken out from the autoclave.

Possibilité d'intégrer un insert en acier au-dessus du plan de travail en Corian® où placer les plateaux chauds sortant de l'autoclave.

Possibilità di integrare nel piano in Corian® un inserto in acciaio inox per appoggiare i vassoi caldi in uscita dall'autoclave.

Example of design tailored to the Customer
Exemple de projet sur mesure pour le Client
 Esempio di progettazione su misura per il Cliente

FURNITURE - MEUBLES - ARREDI


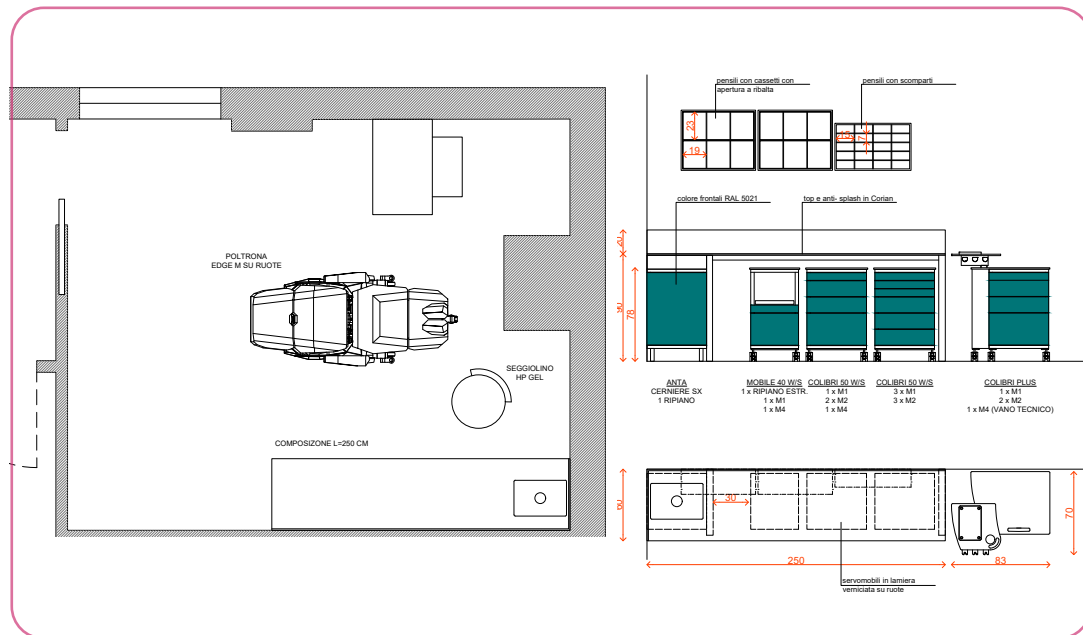


Corian® - Technical Sheet

- Corian® is a non-porous and homogeneous material, composed of approximately 1/3 acrylic resin and approximately 2/3 natural mineral substances.
- The junction points are imperceptible.
- Corian® surfaces are renewable (it can be fully restored to its original appearance by means of common detergents and an abrasive sponge).
- Corian® surfaces are hygienic.
- Corian® is an inert and non-toxic material.
- Corian® meets or exceeds emission guidelines for Volatile Organic Compounds (COV), Hazardous Air Pollutants (HAP).
- Chemical resistance. Class 1 reagents do not alter the material.

Corian® - Fiche Technique

- *Le Corian® est un matériau non poreux et homogène, composé d'environ 1/3 de résine acrylique et d'environ 2/3 de substances minérales naturelles.*
- *Les points de jonction sont imperceptibles.*
- *Les surfaces Corian® sont renouvelables (elles peuvent retrouver leur aspect d'origine à l'aide de produits communs détergents et d'une éponge abrasive).*
- *Les surfaces Corian® sont hygiéniques.*
- *Corian® est un matériau inerte et non toxique.*
- *Corian® respecte ou dépasse les directives d'émission pour les composés organiques volatils (COV), les polluants dangereux pour l'air (HAP).*
- *Résistance chimique. Les réactifs de classe 1 n'altèrent pas le matériau.*

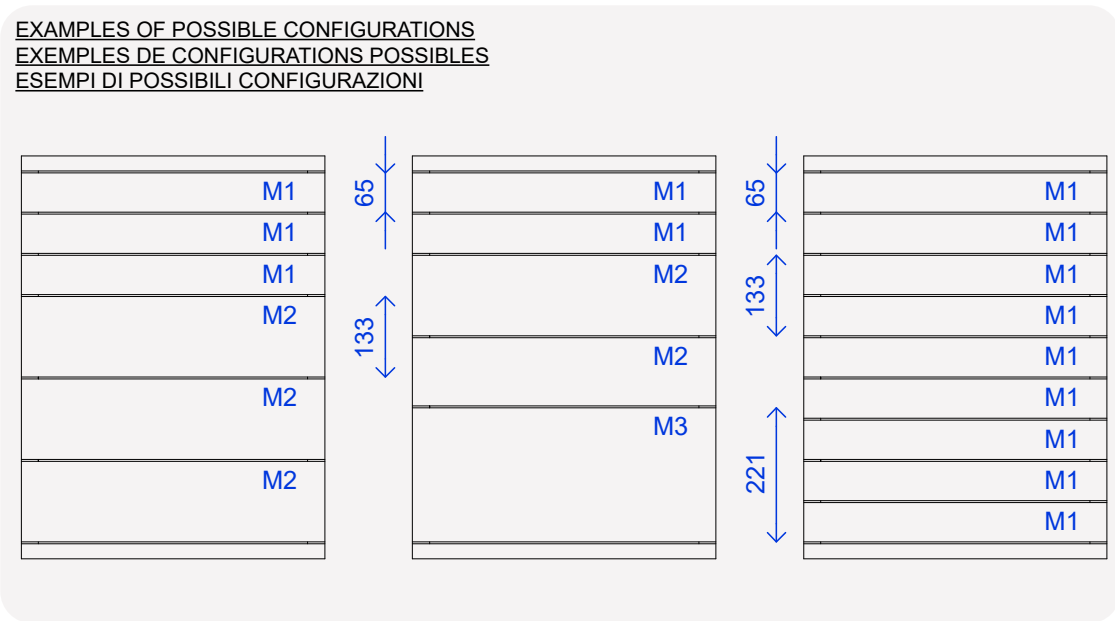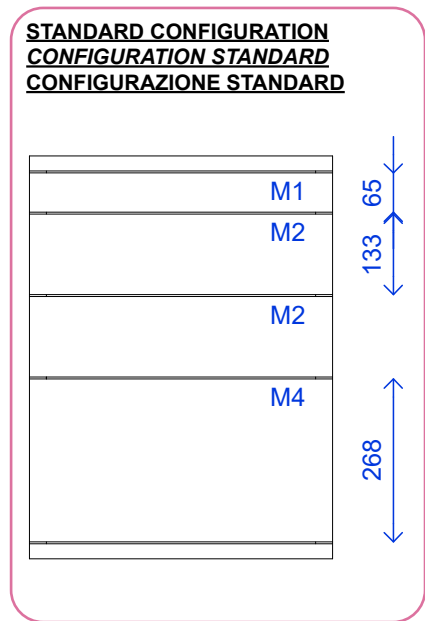

Corian® - Scheda Tecnica

- Corian® è un materiale non poroso e omogeneo, composto da circa 1/3 di resina acrilica e circa 2/3 di sostanze minerali naturali.
- Le giunture sono impercettibili.
- Le superfici in Corian® sono rinnovabili (si possono riportare all'aspetto originale con l'aiuto di normali detersivi e di una spugna abrasiva).
- Le superfici in Corian® sono igieniche.
- Corian® è un materiale inerte e non tossico.
- Corian® soddisfa o supera le linee guida delle emissioni per i composti organici volatili (COV), inquinanti pericolosi per l'aria (HAP).
- Resistenza chimica. I reattivi della classe 1 non alterano il materiale.

codice	descrizione
9210856	COLIBRÌ WORKSTATION



50 cm wide Cabinet with 4 drawers and metal fronts without handles provided with a Push-Pull opening system. Inside the drawers, storage trays for instruments. Cabinet on castors (front wheels equipped with brake) Worktop in Corian®.

OPTIONAL

Meuble de rangement de 50 cm de largeur avec 4 tiroirs et façades métalliques sans poignées équipés d'un système d'ouverture Push-Pull. A l'intérieur des tiroirs, plateaux de rangement. Meuble sur roulettes (les deux à l'avant équipés de frein) Plan de travail en Corian®.

EN OPTION

Mobile con larghezza 50 cm a 4 cassetti con frontali in metallo senza maniglie e sistema di apertura Push- Pull. All'interno dei cassetti, vassoi porta strumenti. Mobile su ruote (le due anteriori con freno) per la movimentazione e piano in Corian®.

OPZIONALE



codice	descrizione
9210868	COLIBRÌ M WORKSTATION



Cabinet 50 cm width. Standard configuration with 4 drawers with metal fronts without handles and Push-Pull opening system. Equipped with internal instrument trays. Corian® side compartment for the equipment lodging (load capacity 8 kg). Mobile on wheels for a comfortable handling (the two front wheels are equipped with brakes). Corian® worktop.

OPTIONAL

Meuble de rangement avec largeur 50 cm. Configuration standard avec 4 tiroirs à façades métalliques sans poignées et système d'ouverture Push-Pull. Équipé de plateaux d'instruments internes. Compartiment latéral en Corian® pour accueillir l'instrumentation (capacité de charge 8 kg). Meuble sur roues (les deux roues avant sont équipées de freins). Plan de travail en Corian®.

EN OPTION

Mobile con larghezza 50 cm. Configurazione standard con 4 cassetti con frontali in metallo senza maniglie e sistema di apertura Push- Pull. All'interno dei cassetti, vassoi porta strumenti. Vano laterale sotto piano per strumentazione (capacità di carico 8 kg). Mobile su ruote (le due anteriori con freno) per la movimentazione. Piano in Corian®.

OPZIONALE

codice	descrizione
9210866	SCIROCCO 85 WORKSTATION



Cabinet 85 cm width with 8 drawers (2 M1, 4 M2 e 2 M4) with metal fronts without handles and Push-Pull opening system. Equipped with internal instrument trays. Mobile on wheels for a comfortable handling (the two front wheels are equipped with brakes). Corian® worktop.

OPTIONAL

Meuble de rangement avec largeur 85 cm avec 8 tiroirs (2 M1, 4 M2 e 2 M4) à façades métalliques sans poignées et système d'ouverture Push-Pull. Équipé de plateaux d'instruments internes. Meuble sur roues (les deux roues avant sont équipées de freins). Plan de travail en Corian®.

EN OPTION

Mobile con larghezza 85 cm. Configurazione standard con 8 cassetti (2 M1, 4 M2 e 2 M4) con frontali in metallo senza maniglie e sistema di apertura Push- Pull. All'interno dei cassetti, vassoi porta strumenti. Mobile su ruote (le due anteriori con freno) per la movimentazione. Piano in Corian®.

OPZIONALE

codice	descrizione
9210871	SCIROCCO 90 WORKSTATION



Cabinet 90 cm width with 6 drawers (2 drawers 40 cm wide and 6 drawers 50 cm wide) with metal fronts without handles and Push-Pull opening system. Extendable metal shelf with Soft Touch system. Equipped with internal instrument trays. Mobile on wheels for a comfortable handling (the two front wheels are equipped with brakes). Corian® worktop.

OPTIONAL

Meuble de rangement avec largeur 90 cm avec 6 tiroirs (2 tiroirs largeur 40 cm et 6 tiroirs largeur 50 cm) à façades métalliques sans poignées et système d'ouverture Push-Pull. Étagère métallique extensible avec système Soft Touch. Équipé de plateaux d'instruments internes. Meuble sur roues (les deux roues avant sont équipées de freins). Plan de travail en Corian®.

EN OPTION

Mobile con larghezza 90 cm a 6 cassetti (2 cassetti largh. 40 cm e 6 cassetti largh. 50 cm) con frontali in metallo senza maniglie e sistema di apertura Push- Pull. Piano estraibile in lamiera con guida Soft Touch. All'interno dei cassetti, vassoi porta strumenti. Mobile su ruote (le due anteriori con freno) per la movimentazione. Piano in Corian®.

OPZIONALE